


Ficha técnica

SEMP CARE VISCO 700, almohada de espuma viscoelástica para la fijación y el control de la presión en la cabeza

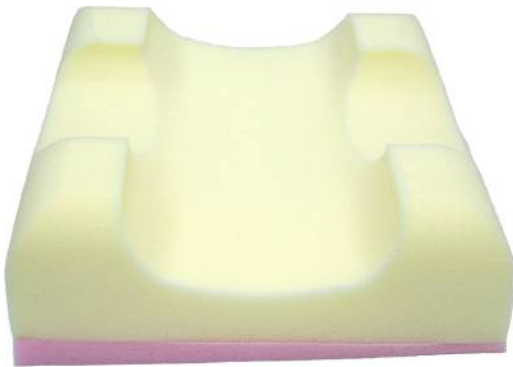

Descripción

Almohada fabricada en espumas viscoelásticas de alta calidad, flexibles y transpirables con propiedades termosensibles, lo cual favorece una total adaptación a la forma de la cabeza así como la transpiración del material.

Indicaciones

Sistema para la fijación y el control de la presión en la cabeza en pacientes críticos. Superficie especial para el manejo de la presión (SEMP) en forma de almohada destinada a la prevención de úlceras por presión en la cabeza y a mejorar la fijación de la cabeza en pacientes críticos con necesidades especiales, especialmente diseñada para adultos y niños.

Favorece la circulación sanguínea de los tejidos cutáneos del cráneo y al adaptarse a cualquier protuberancia, forma o posición evitamos que se ejerzan presiones altas en zonas localizadas y de alto riesgo para desarrollo de UPP.

En el caso de pacientes con UPP permite minimizar la presión de contacto en las zonas de apoyo.

Características técnicas de la almohada


La parte superior está fabricada en espuma viscoelástica suave de color amarillo perfilada con una forma específica destinada para el posicionamiento del cuello y el alivio de presión en las orejas.

Características

- Permite una adaptación total de la SEMP a la superficie craneal: su forma ergonómica permite la adaptación a la anchura de diferentes tamaños de cuellos al mismo tiempo que su base con diferente altura permite posicionar mejor cada cabeza en función de las necesidades específicas de cada paciente. Uno de los lados permite una mayor hiperextensión de la cabeza.
- Permite que el peso de la cabeza se reparta en una mayor superficie y así evitar presiones altas localizadas.
- Disminuye el riesgo de aparición de úlceras por presión (UPP)
- Fabricado bajo normativas ISO, en ausencia de sustancias nocivas y con estudios de no toxicidad (*Instituto HygCen y Öeko Tex Standard 100 Clase II*)
- Funda exterior impermeable, antialérgica, transpirable, antiácidos y lavable.

La parte inferior es de espuma viscoelástica de color rosa, ligeramente más dura, para ofrecer un buen soporte y cortada de manera diagonal para ofrecer dos alturas y adaptar, no solo el cuello sino la altura que cada paciente necesite en cada momento o según la dolencia que padezca.

Además esta base presenta un hueco circular en el centro que permite que cuando la cabeza se apoya sobre la parte amarilla descansa en la espuma (suspensión viscolástica) en lugar de sobre otro soporte por lo que disminuyen aún más las presiones al no estar apoyándose directamente en la base ni quedar suspendida en el aire, con lo que se consigue un óptimo reparto de los niveles de presión de contacto y se mejora la transpirabilidad de la zona occipital.

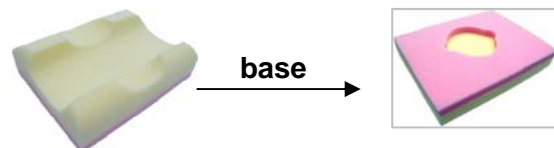

Dimensiones:

- 22 x 18 x 6.9cm (pediátrico pequeño)
- 30 x 24 x 9.1cm (pediátrico grande)
- 40 x 32.5 x 11.4cm (adulto pequeño)
- 45 x 36 x 11.4cm (adulto grande)

SEMP CARE VISCO 700, almohada de espuma viscoelástica para la fijación y el control de la presión en la cabeza

Funda:

Funda de poliuretano bielástica (elástica en los dos ejes: ancho y largo) de color verde y con cremallera en su base para facilitar su manipulación.

La funda presenta propiedades en su parte superior que minimizan el efecto de las fuerzas de fricción y cizalla a la vez que presenta un elevado nivel de impermeabilidad (columna de agua >200cm de acuerdo con la norma ISO 1420), es antialérgica, transpirable (1020 gr/m²-24h a 38°C según ASTM 96-99) con un tratamiento antiácaros y antibacteriano y está fabricada libre de látex.

Composición

Espuma: La parte superior está fabricada en espuma viscoelástica suave con densidad 50 kg/m³ y compresión (dureza) de 1,10 KPa.

La parte inferior es de espuma viscoelástica de color rosa con densidad 50kg/m³ y compresión (dureza) de 4.6 KPa

Funda: Fabricada en poliuretano y poliamida.

Lavado de la espuma

Esta espuma viscoelástica se puede lavar si fuera necesario:

- Máximo 60°C, detergente muy suave
- No centrifugar ni escurrir bruscamente porque el material se podría desgarrar
- Utilizar red protectora para el lavado para proteger el producto de la tracción
- Secar en posición horizontal y en un sitio muy ventilado y libre de humedad

Lavado de la funda

- Lavar máximo 95°C
- No usar lejía ni derivados
- Resiste algunos desinfectantes y ciclos de autoclave (Limitados)
- No planchar
- Limpieza en seco no recomendada (estricta limitación en agua, temperatura y acción mecánica)
- Se puede secar en secadora (programa moderado y temperatura reducida)

Caducidad

Las características intrínsecas del producto no se alteran con el tiempo.

El proceso de oxidación es un proceso natural que sufre la espuma de poliuretano y la espuma viscoelástica, causada por el oxígeno presente en el aire o por la luz y provoca que la espuma adquiera un color amarillento o anaranjado con el tiempo, pero este proceso no supone ninguna merma de las propiedades del producto.

Se puede reducir procurando protegerlo con la funda el mayor tiempo posible.

Almacenaje

Mantenerlo lejos de la luz, en un lugar seco y a una temperatura de entre 5 y 40°C.

Clase CE

I, no estéril

Otras certificaciones

Certificado Öeko-Tex Standard 100 clase I para espumas y funda (ausencia de sustancias nocivas para la salud).

Garantía

2 años ante cualquier defecto de fabricación. No válida si el uso o el mantenimiento del cojín no se hacen siguiendo las indicaciones de las instrucciones o si el propietario permite que personas no autorizadas hagan un uso incorrecto del mismo.

Fabricante

C.Q.F

Autovía Madrid-Toledo, A-42, Km 63.300. P. Industrial Matracón, 4 – 45280 Olias del Rey, Toledo, España.

Presentación

Código de producto	Descripción
546VIS700XS	SEMP CARE VISCO 700, 22 x 18 x 6.9cm (pediátrico pequeño)
546VIS700S	SEMP CARE VISCO 700, 30 x 24 x 9.1cm (pediátrico grande)
546VIS700L	SEMP CARE VISCO 700, 40 x 32.5 x 11.4cm (adulto pequeño)
546VIS700XL	SEMP CARE VISCO 700, 45 x 36 x 11.4cm (adulto grande)

Curación de Heridas

Smith & Nephew, S.A. Fructuós Gelabert, 2-4, 08970 Sant Joan Despí (Barcelona)

Tel.: 93 373 73 01; Fax: 933 373 74 53;

Tel. Atención Cliente: 902030 31 61; Fax. Atención cliente: 902 30 31 70

EducaciónAWM@smith-nephew.com

www.smith-nephew.com

www.prevenecare.org